BI-BED-6102-0011 / -0012 -V 1.1 29.07.2026

Sicherheit
Safety

Montage
Mounting

Bedienung
Handling

Stückliste
Bill of material

UDAPTION®

Mobile-Series


Rahmen-Schnellkopplung 2.0


Frame quick coupler 2.0


6102-0011 (R) 6102-0012 (L)




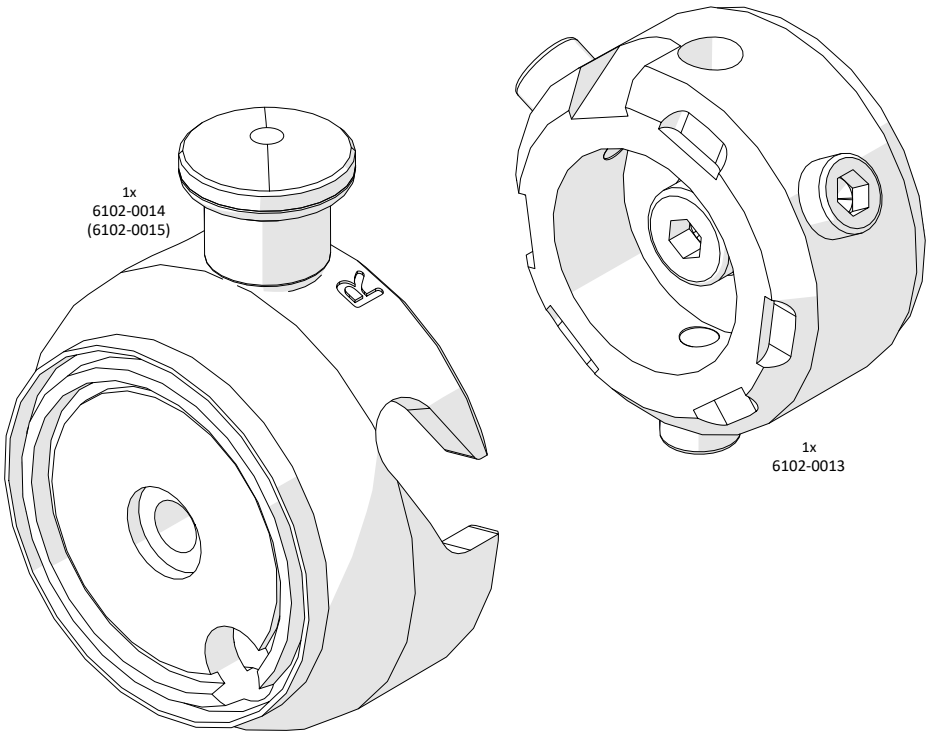




1x
6102-0014
(6102-0015)
1x
6102-0013

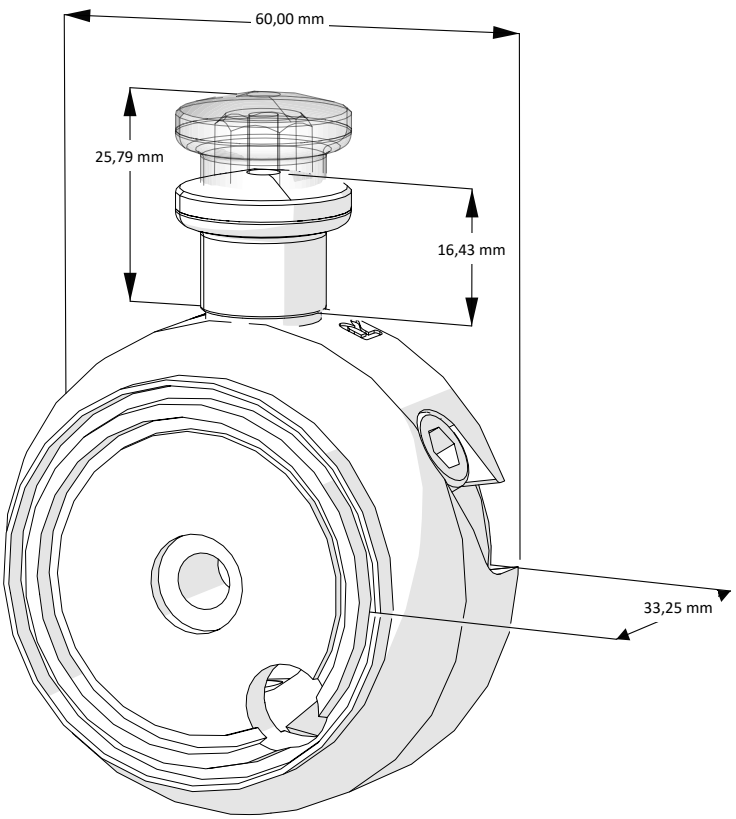
60,00 mm
25,79 mm
16,43 mm
33,25 mm

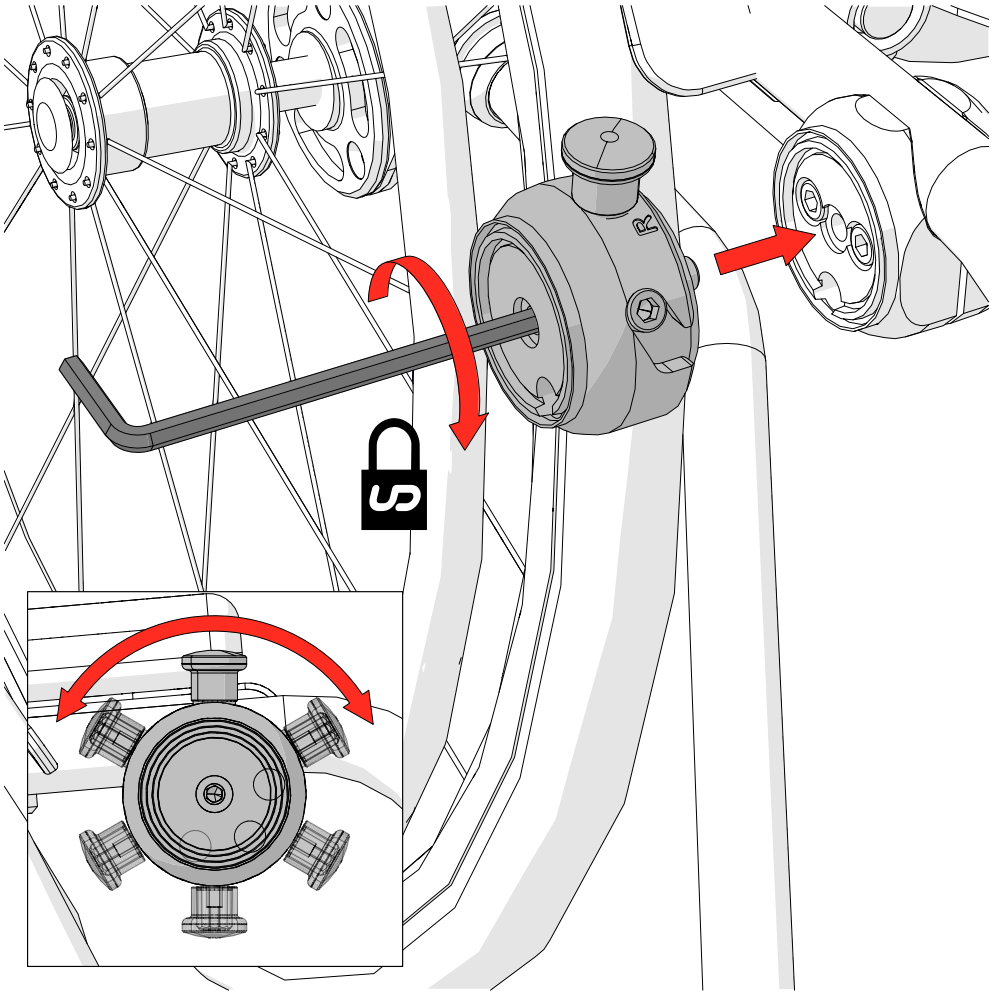

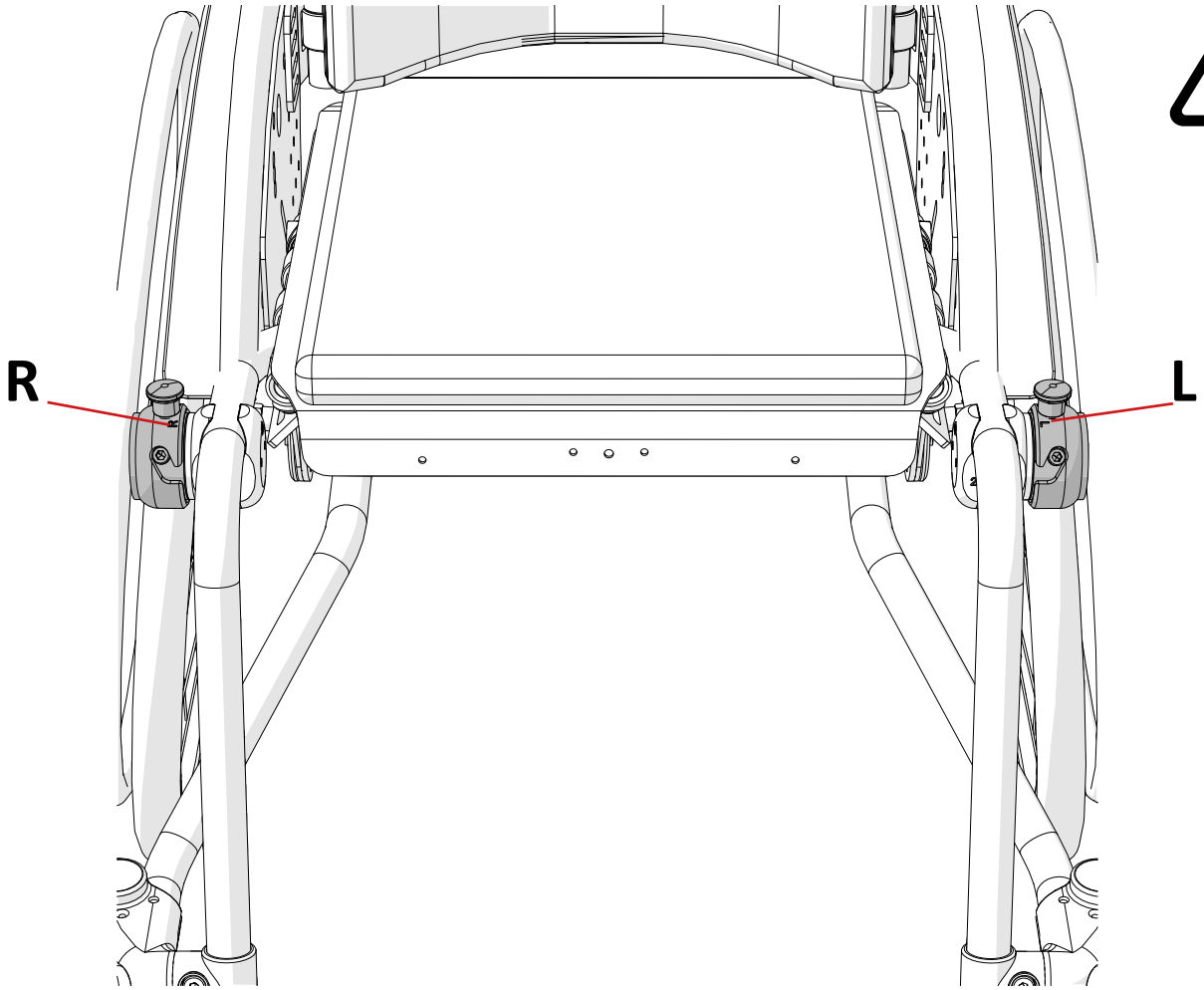

R
L

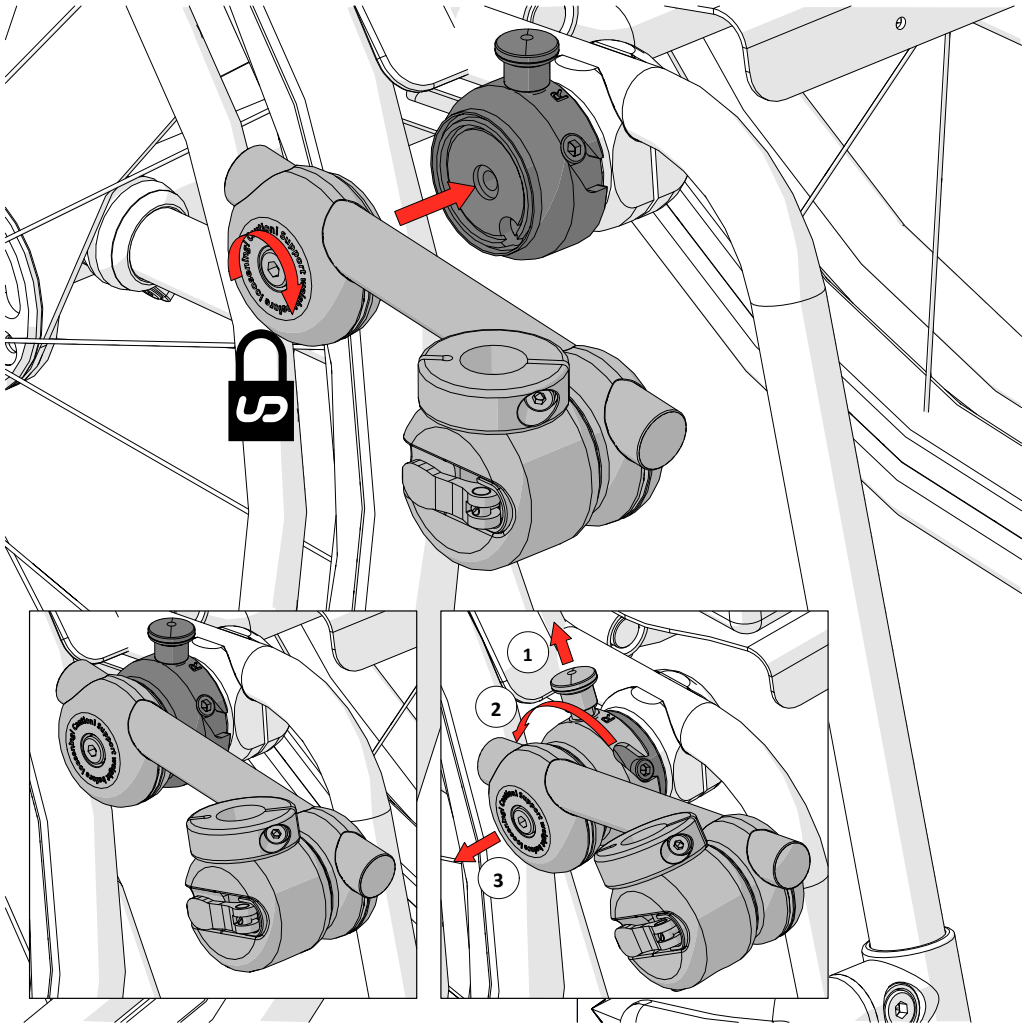
1
2
3

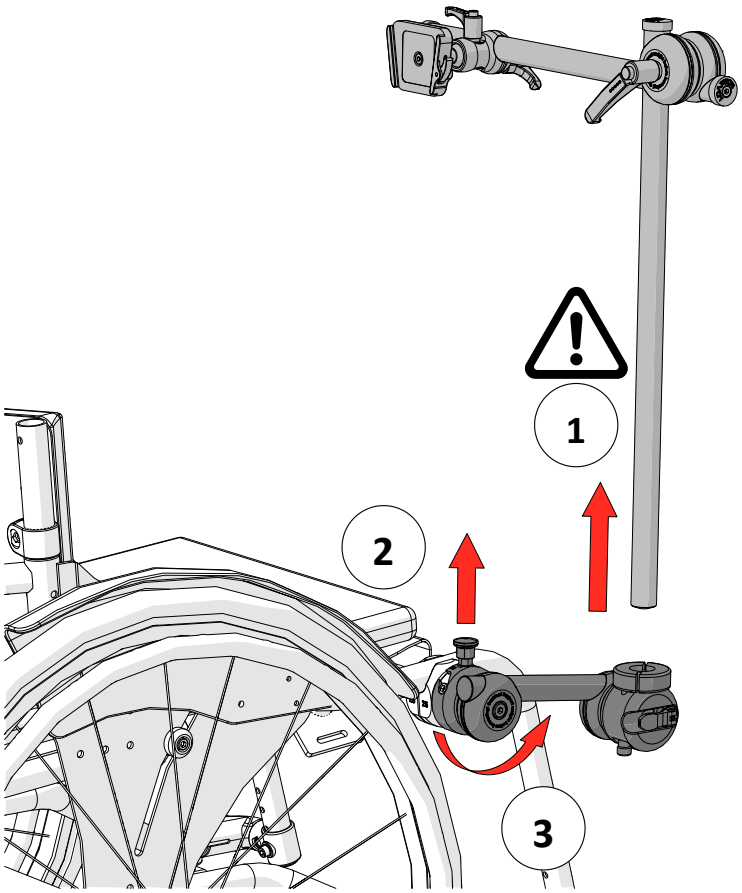
1
2
3


The frame-quick-coupler is suitable only for 3-tube systems. The first pipe must be tilted forward by at least 15°.


Die Rahmen-Schnellkopplung ist nur für 3-Rohr-Systeme geeignet. Das erste Rohr muss um mindestens 15° nach vorne geneigt werden.

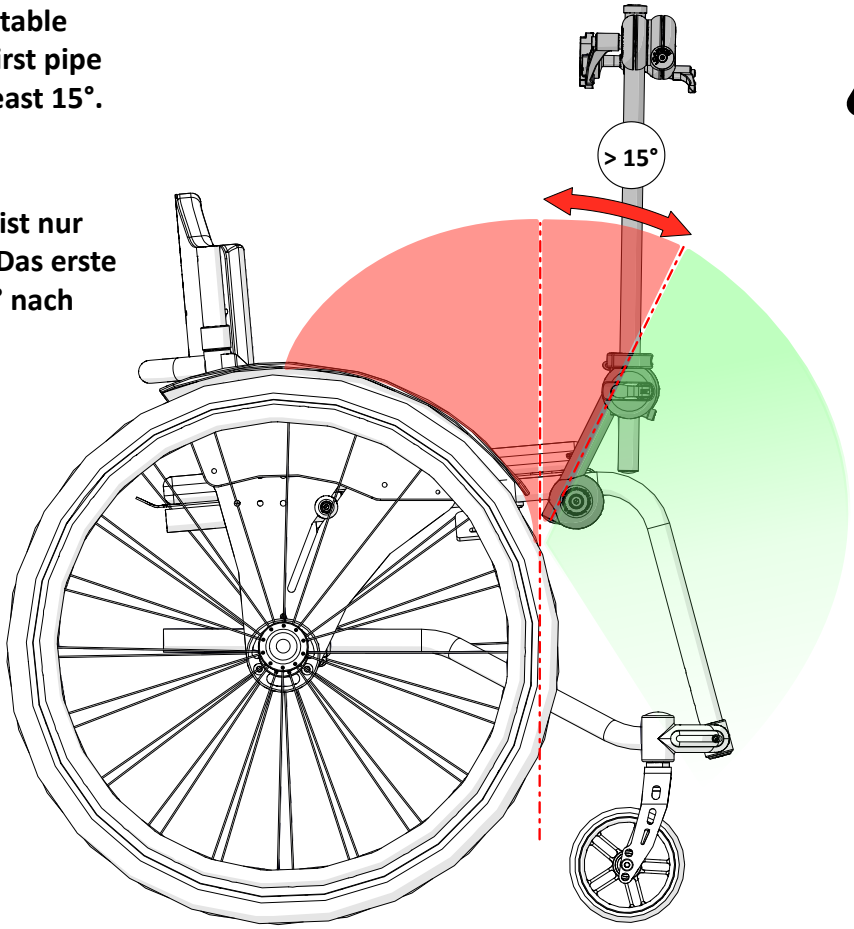

At maximum tilt of the wheelchair, the mounted devices center of gravity must be in front of or above the frame-quick-coupler (green area).

Bei maximaler Kantelung des Rollstuhles muss sich der Schwerpunkt des adaptierten Gerätes vor oder über der Schnellkupplung befinden (grüner Bereich)

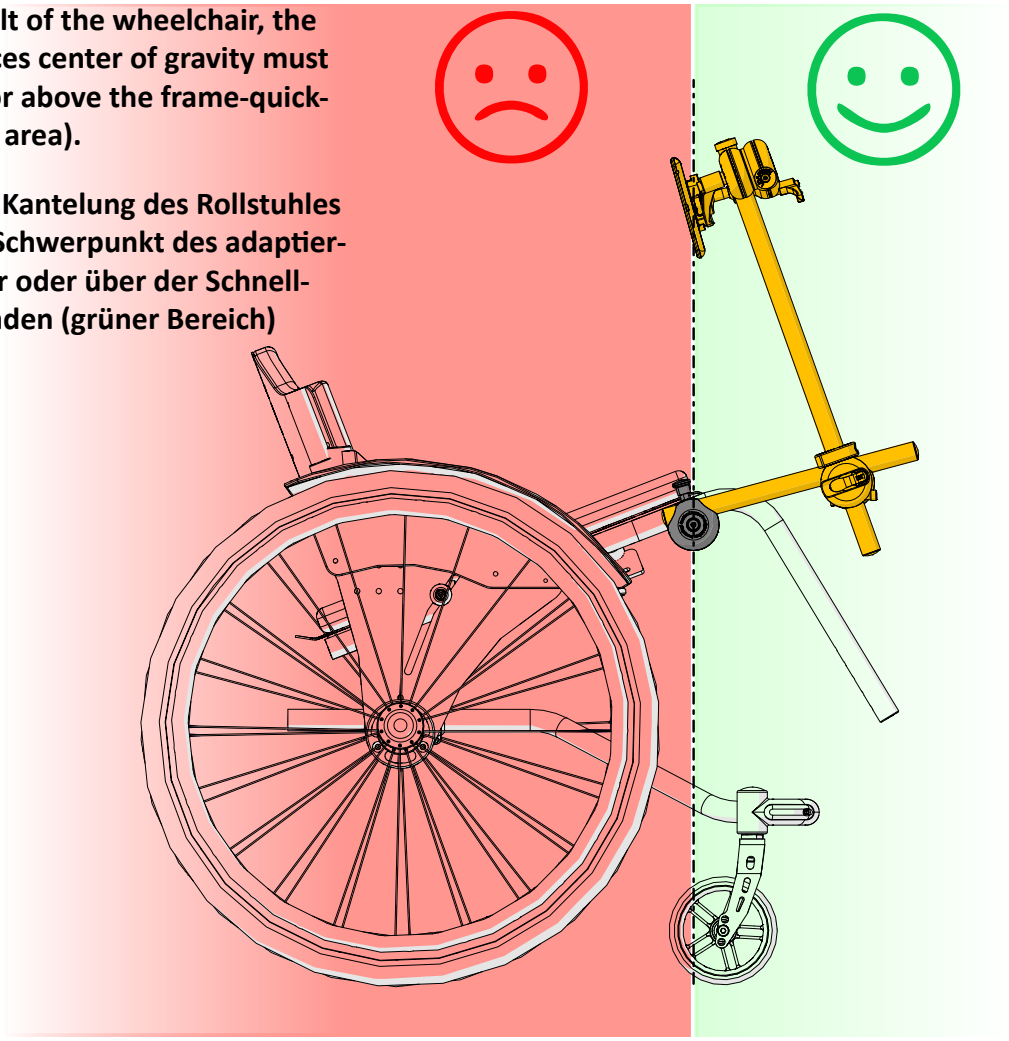

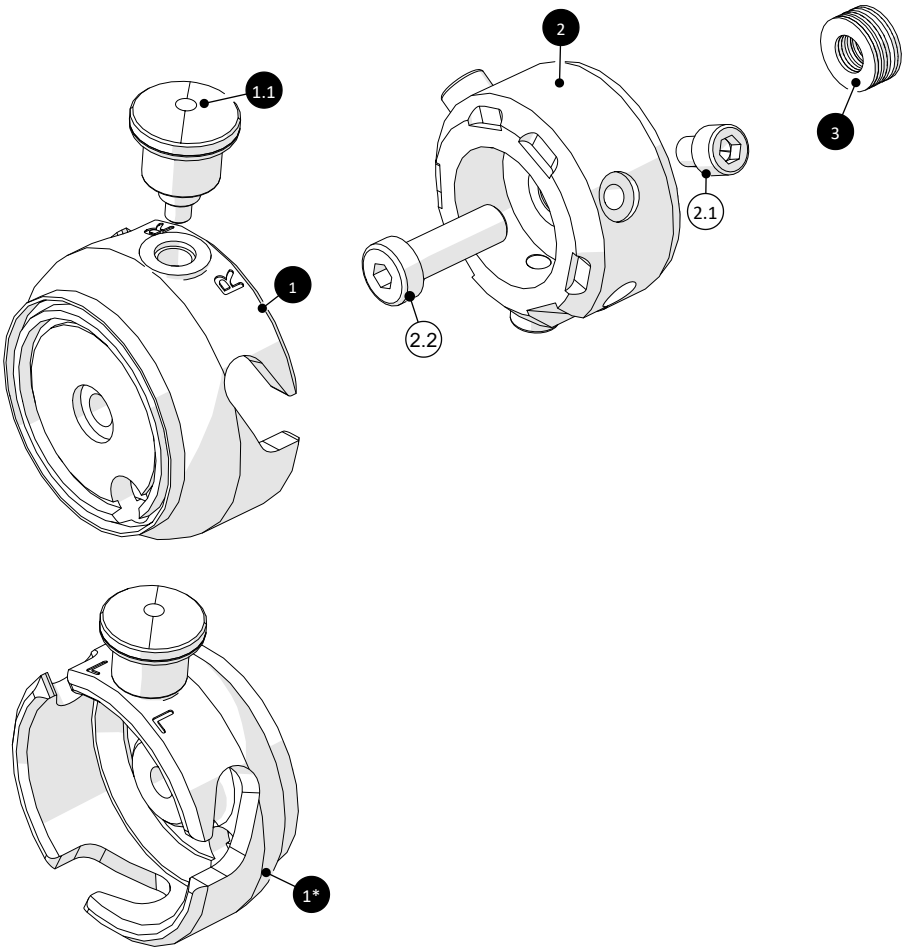


Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	6102-0014	Kopplungsstück 2.0 rechts / Coupling piece 2.0 right	1
1*	6102-0015	Kopplungsstück 2.0 links / Coupling piece 2.0 left	1
1.1	1129-0050 DOR/DBL	Mini Raster M8 / Mini locking pin M8	1
2	6102-0013	Basis Rahmen-Schnellkopplung 2.0 / Base frame coupler 2.0	1
2.1	1022-0608	Zylinderschraube M6X8 / Cylinder head bolt M6X8	3
2.2	1022-0820	Zylinderschraube M8X20 / Cylinder head bolt M8X20	1
3	1130-1001	Federpaket RKN 50 / Spring package RKN 50	1

Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Mobile-Series“
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document “General safety and warning information for „Mobile-Series”
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”



Veuillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d‘avertissement pour „Mobile-Series”
Veuillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Mobile-Series”
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”



Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para „Mobile-Series”
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección“.



Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para „Mobile-Series”
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Mobile-Series” című dokumentumot is. Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwingsinformatie voor „Mobile-Series”
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Mobile-Series”
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Mobile-Series”
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“



Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Mobile-Series”
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Mobile-Series”
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH

Struthof 2
55595 Münchwald / Germany

+49 6706 915 1630

+49 6706 915 1640

udaption@insors.de

www.udaption.com